





*Catalogue instruments réutilisables
pour la chirurgie ophtalmique*

Re-usable instruments for ophtalmic
surgery catalogue

**Wiederverwendbare Instrumente für die
ophthalmische Chirurgie**

SOMMAIRE
TABLE OF CONTENTS
INHALTSVERZEICHNIS



<i>Consignes de stérilisation</i>	6
Reprocessing instructions	
Wiederaufbereitungsanweisung	

<i>Blépharostats</i>	18
Eye specula	
Lidsperrer	

<i>Pinces</i>	22
Forceps	
Pinzetten	

<i>Ciseaux</i>	32
Scissors	
Scheren	

<i>Crochets</i>	40
Hooks	
Haken	

<i>Porte-aiguilles</i>	44
Needle holders	
Nadelhalter	

<i>Canules</i>	48
Cannulae	
Kanülen	

<i>Voies Lacrymales</i>	54
Lachrymal instruments	
Lakrimalinstrumente	

<i>Instruments divers</i>	58
Other instruments	
Andere Instrumente	

<i>Injecteurs et pinces I/O</i>	62
IOL injectors and forceps	
IOL-Injektoren und Pinzetten	

<i>Boîtes de stérilisation</i>	68
Sterilization cases	
Sterilisierbehälter	



CONSIGNES DE STÉRILISATION

I. INTRODUCTION

Ces consignes de stérilisation ont pour objet de rappeler les bonnes pratiques de manipulation, décontamination, nettoyage, désinfection, stérilisation et stockage des instruments chirurgicaux. Nous tenons à vous préciser que la durée de vie et le bon fonctionnement d'un instrument de chirurgie dépend du soin apporté lors de ces étapes. Un instrument qui ne fonctionne pas correctement représente un risque potentiel pour l'utilisateur et le patient. Ces consignes ne sont qu'informatives. Il convient de vous conformer à la réglementation de votre pays et aux procédures particulières en vigueur dans votre établissement.

Nos instruments sont fabriqués en acier inoxydable ou en titane de qualité chirurgicale répondant à des normes strictes établies par les autorités gouvernementales européennes et internationales. Cependant, ces instruments, lorsqu'ils sont exposés à des conditions défavorables, peuvent se corroder.

Aussi, il est important de respecter un certain nombre de règles lors de leur cycle d'utilisation.

II. CONDITIONS DE STOCKAGE

Les instruments doivent être stockés :

- dans des pièces sèches, propres et adaptées, sans écart de température,
- à l'écart de substances pouvant avoir une action corrosive ou d'instruments dont la surface est corrodée ou abîmée, de préférence en fonction de la nature du matériau et en évitant leur empilage. Une attention particulière devra être apportée à leur poids (mettre les instruments les plus lourds en dessous des autres).

III. SOINS ET MANUTENTION DES INSTRUMENTS

- Les instruments chirurgicaux sont prévus pour un usage spécifique (couper, tenir ...).
- Tout autre emploi que celui prévu entraînera une détérioration de l'instrument.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous de la propreté de l'instrument et vérifiez son état sous microscope.
 - Les instruments doivent être essuyés après chaque utilisation de façon à éliminer au préalable tout produit antiseptique, toute trace de tissus, de sang, de débris cellulaires ou d'un dépôt quelconque. De même, il est impératif d'éliminer toute substance pouvant faire obstacle à la pénétration du liquide de décontamination dans les instruments creux.
 - Pour le ré-acheminement de l'instrumentation souillée, veuillez utiliser des bacs ou containers adaptés. Il est recommandé d'effectuer le ré-acheminement en milieu liquide.
 - Le trempage prolongé des instruments dans du sérum physiologique est prohibé. Nous recommandons d'utiliser de l'eau déminéralisée.

IV. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Il est important de mettre en place, en accord avec le pharmacien, le médecin hygiéniste et l'ingénieur biomédical, des procédures validées de décontamination et/ou d'inactivation ainsi que de nettoyage des instruments chirurgicaux en termes d'efficacité du nettoyage, de maintien des propriétés de l'instrumentation et de conformité aux exigences nationales ou internationales (en France, circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 en date du 14 mars 2001). Ces procédures doivent être mises en œuvre immédiatement après l'utilisation de l'instrument pour éviter que des substances organiques ne sèchent à sa surface ou dans les interstices.

Selon la classification de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'acte chirurgical en ophtalmologie est réalisé sur un organe ayant un haut potentiel d'infectiosité du fait de la contamination potentielle par les ATNC (agents de transmission non conventionnels). Les instruments doivent donc être traités à part.

D'une façon générale, il convient d'inclure dans le cadre d'une procédure ophtalmologique les mentions suivantes :

Trempage et Décontamination

Pour éviter le séchage des souillures et le développement microbologique sur le matériel, celui-ci doit être mis à tremper aussitôt après chaque utilisation dans un bain de trempage sans aldéhyde. Ce bain de décontamination protège le personnel manipulant les instruments ainsi que leur environnement et facilite le nettoyage ultérieur.

Il convient alors de respecter les instructions suivantes:

- Conformez-vous au mode d'emploi des solutions de décontamination,
- Respectez une durée de trempage minimum de 15 minutes,
- Utilisez une solution de décontamination sans chlorures,
- Immergez totalement l'instrumentation dans le bain de décontamination, les instruments articulés devant être ouverts au maximum et ceux composés de plusieurs parties devant être désassemblés,
- Les bacs des blocs opératoires, exclusivement réservés à la décontamination, doivent être changés après chaque intervention,
- Rincez à l'eau déminéralisée.

Nettoyage

Le nettoyage peut-être réalisé soit en machine à laver, soit par passage aux ultrasons, soit de façon manuelle si les instruments sont toujours souillés après la phase de décontamination. Quelque soit la méthode utilisée, il est impératif de respecter le mode d'emploi des produits de nettoyage, certains pouvant permettre, dans un même temps, la décontamination et le nettoyage.

Nettoyage manuel

- Le nettoyage manuel nécessite l'emploi d'une brosse en plastique souple pour les manches et d'un linge propre pour les extrémités. Les brosses métalliques sont à proscrire.
- Effectuez un rinçage minutieux à l'eau déminéralisée.

Nettoyage en machine

- Respectez les indications données par le fabricant de la machine.
- En positionnant les instruments, veillez à ce qu'ils ne s'entrechoquent pas ou qu'ils ne se détériorent pas.
- Tenez compte du poids et de la forme des instruments. Les instruments lourds doivent être placés sous les plus légers alors que les instruments creux sont placés dans les paniers. Les zones d'ombre doivent être évitées, les instruments articulés doivent être ouverts au maximum et ceux composés de plusieurs parties doivent être désassemblés.
- Ne surchargez pas les paniers et la machine.

Nettoyage aux ultrasons

Le nettoyage aux ultrasons n'est pas recommandé.

Cependant, si cette méthode de nettoyage est employée, il convient de respecter les règles de base suivantes :

- Conformez-vous aux indications données par le fabricant de la machine.
- Respectez une température de 40-45°C.
- Utilisez une fréquence comprise entre 25 et 50 kHz.
- Le cycle de nettoyage ne doit pas excéder 5 minutes (temps de dégazage exclu).
- Utilisez un produit nettoyant et/ou mouillant approprié.
- Il est recommandé de traiter à part les instruments fragiles, en évitant tout frottement sur les parties les plus altérables.

Inactivation des ATNC

Les agents responsables de la maladie de Creutzfeldt Jakob, agents transmissibles non conventionnels (ATNC) ou « prions », sont particulièrement résistants à de nombreux traitements physiques et chimiques. Les traitements habituels sont peu ou pas efficaces (chaleur jusque 130°C/226°F en milieu humide, ultrasons, UV, éthanol, formaldéhyde...). Il convient d'inclure dans la procédure de prétraitement une inactivation particulière. Pour la France, se reporter aux recommandations du Ministère de la Santé relative "aux précautions à observer en milieu chirurgical (...) face aux risques de transmission de la maladie de Creutzfeldt Jakob".

- Préférer l'inactivation physique (entre 134°C et 138°C pendant 18 minutes, autoclave à charge poreuse).
- Proscrire l'utilisation de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel).
- En cas d'inactivation chimique, procéder à un rinçage à l'eau déminéralisée.

NB : pour les instruments en titane, le traitement à l'hydroxyde de sodium peut entraîner une décoloration du bleu anodisé. Cependant, cela n'a pas d'incidence sur l'état de la surface de l'instrument.

La mise en œuvre d'une inactivation chimique ne dispense pas d'une étape de stérilisation.

Rinçage / Séchage

Tous les instruments doivent être rincés à l'eau déminéralisée et séchés rapidement et soigneusement à l'aide d'un linge propre ou d'air comprimé filtré.

V. CONTROLE / ENTRETIEN / REPARATIONS

Afin d'éviter la corrosion ou l'apparition de taches, des contrôles réguliers seront effectués et des actions correctives devront être prises durant toute la vie de l'instrument.

Ces contrôles porteront sur la propreté, le fonctionnement et l'aspect des instruments.

Suite à ces contrôles, il peut apparaître que certains instruments aient besoin d'être lubrifiés, affûtés ou réparés.

La lubrification peut se faire en interne. Il faut cependant faire attention à la qualité du lubrifiant, celui-ci devant, par exemple, être perméable à l'eau pour permettre une stérilisation à l'autoclave (dans ce cas, proscrire le silicone).

CROMA GmbH assure la réparation des instruments vendus par ses services.

Les instruments doivent nous être retournés, après avoir subi la procédure complète de traitement décrite ci-dessus, dans un conditionnement similaire à celui dans lequel ils vous ont été livrés de façon à garantir des conditions adéquates de retour. Un devis vous sera envoyé sur demande. Si votre instrument est irréparable, nous vous contacterons afin de définir ensemble des suites à donner.

VI. STERILISATION

Après reconstitution des paniers (instruments au premier rang de la crémaillère et en faisant attention à ne pas les surcharger), trois modes de stérilisation peuvent être mis en œuvre :

- Stérilisation à la vapeur (autoclave à charge poreuse) 134°C pendant 18 minutes (temps théorique dans des conditions idéales).
- Stérilisation à la vapeur (autoclave) 121°C pendant 20 minutes.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Dans le cas de la stérilisation à la vapeur, les instruments doivent être exempts de traces d'huile et d'autres impuretés et ne doivent contenir aucun autre produit chimique de correction.

La stérilisation d'un instrument en position fermée est interdite.

Les durées et conditions de stérilisation recommandées peuvent varier d'un pays à un autre. Il convient de vous conformer à la réglementation de votre pays et aux procédures particulières en vigueur dans votre établissement.

VII. RECOMMANDATIONS

- Les instruments CROMA, livrés non stériles doivent impérativement suivre un protocole de décontamination, nettoyage, désinfection et/ou stérilisation avant toute utilisation. Après vérification des instruments (absence de trace), ce premier cycle de traitement servira à valider la procédure pour l'ensemble des instruments.
- L'utilisation d'eau déminéralisée lors des rinçages diminue les risques de taches, ternissures, et de piqûres de corrosion.

VIII. ECHANGE / GARANTIE

- Ne seront échangés que les instruments neufs n'ayant jamais été utilisés et/ou stérilisés ou ceux présentant un défaut lors de leur première utilisation.
- Tous nos instruments bénéficient d'une garantie d'un an à partir de la date de facturation dans le cadre d'une utilisation appropriée et d'un entretien correspondant à ceux décrits ci-dessus et en l'absence de chutes ou de chocs.

REPROCESSING INSTRUCTIONS

I. INTRODUCTION

The purpose of these reprocessing instructions is to stress the importance of proper handling, decontamination, cleaning, disinfection, sterilization and storage practices of surgical instruments. We would like to point out that the service life and functionality of a surgical instrument depend on the care given to all these steps.

An instrument that does not work properly is a potential risk for user and patient.

These instructions are for your information only. You have to comply with the statutory regulations in your country as well as the specific procedures that are in use in your hospital/clinic.

Our surgical quality stainless steel or titanium instruments meet very strict standards that have been defined by the European and international statutory authorities.

However, when exposed to inappropriate storage conditions, these instruments may corrode.

Therefore, a certain number of rules should be followed during their using cycle.

II. STORAGE CONDITIONS

The instruments should be stored:

- in appropriate, dry and clean rooms, without any temperature deviation,
- away from substances that may be corrosive and away from instruments with a corroded or damaged surface, preferably according to the items' type of material and without piling them up. Attention should be paid to their weight (put the heaviest instruments underneath the others).

III. CARE AND HANDLING

- Surgical instruments have a specific intended use (cutting, holding ...). Any improper use of the instrument will cause its deterioration.
- Before each use, make sure the instrument is clean and check its state under a microscope.
- All instruments must be wiped after each use, so as to eliminate any mark of antiseptic solution, any traces of tissues, cellular deposits, blood traces or any other deposits. Any substance that might prevent the decontamination liquid from entering hollow instruments must be removed as well.
- To return soiled instruments, please use appropriate trays or containers. The instruments should be returned in a liquid.
- Prolonged soaking in a physiological saline solution is prohibited. We recommend using distilled water.

IV. CLEANING INSTRUCTIONS

Validated decontamination and/or inactivation as well as cleaning procedures must be set up in collaboration with the pharmacist, the hygienist and the biomedical engineer of the various hospitals/clinics, in terms of efficacy, maintenance of the surgical instruments properties and compliance with national and international requirements (for France, please refer to circular letter DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 dated 14 March 2001).

The above-mentioned procedures must be implemented immediately after using the instrument to avoid drying of any organic substance on the surface of the instrument or in its hollow parts.

According to the World Health Organization (WHO) classification, ophthalmic surgical procedure is performed on an organ with high infection risks due to the NCTA (non conventional transmissible agents). The instruments must therefore be handled separately.

The above-mentioned procedures should include the following conditions:

Immersion and decontamination

In order to prevent stains or impurities from drying and microbiological contamination on the instrument, it must be immersed immediately after use in an aldehyde-free decontaminating bath. This decontaminating immersion protects the staff in charge of instrument handling as well the environment and facilitates further cleaning procedures.

The following should then be taken into account:

- Comply with the instructions for use of the decontaminating solutions
- Minimum soaking time of 15 minutes
- Use a chloride-free solution
- The instruments must be immersed completely in a decontaminating bath, hinged-joint instruments must be completely opened and those made of several parts must be disassembled.
- The sieving trays in operating rooms that are exclusively dedicated to decontamination must be changed after each surgery.
- Rinse with distilled water.

Cleaning

Cleaning can be performed either in a machine or by ultrasound or manually if impurities are still visible on the instruments after decontamination.

Regardless of the cleaning method that is used, the detergents' instructions for use have to be followed as some of them can be used for decontamination and cleaning at the same time.

Manual cleaning

- Manual cleaning requires the use of a soft plastic brush for cleaning the handles and a soft clean cloth for the tips. Metal brushes are forbidden.
- Thoroughly rinse with distilled water

Mechanical cleaning

- The manufacturer's instructions are to be followed
- When positioning the instruments ensure that they do not come into contact with one another and that they are not damaged. Consider the weight and the shape of the instruments. Heavy instruments should be placed beneath lighter ones whereas hollow instruments must be put into a disinfection basket. Shadow areas must be avoided and hinged instruments must be completely opened and those made up of several parts must be disassembled.
- Do not put too many instruments in the disinfection baskets and in the machine.

Ultrasound cleaning

Ultrasound cleaning is not recommended.

However, if this cleaning method is applied, the following basic measures must be taken into account:

- The instructions given by the manufacturer must be followed.
- Temperature must be of 40-45°C.
- A frequency ranging from 25 to 50 KHz should be used.
- The ultrasound cleaning cycle should not exceed 5 minutes (excluding degassing time).
- Use a suitable cleaning and/or moisturising agent.
- Fragile instruments should be treated separately and the metal parts of the most delicate instruments should not be rubbed against metal.

NCTA inactivation

The agents that are responsible for Creutzfeldt-Jakob disease, non conventional transmissible agents (NCTA) also known as "prions", are particularly resistant to numerous physical and chemical treatments. Since the current treatments are not or only partially efficient (130°C/226°F temperature in humid environment, ultrasounds, UV, ethanol, formaldehyde ...), a particular inactivation procedure should be included in the pre-treatment procedure. For France, please refer to the recommendations provided by the French Ministry of Health concerning "the measures to be followed in the surgical field (...) with respect to the transmission risks of the Creutzfeldt-Jakob disease".

- Preferably use physical inactivation (between 134°C and 138°C for 18 minutes, autoclave sterilization for porous instruments)
- The use of sodium hypochlorite (bleach) is forbidden.
- In case of chemical inactivation, rinse with distilled water.

NB: for titanium instruments, treatment with sodium hydroxide may cause anodised blue to fade.

However it will not affect the state of the instrument's surface.

Despite chemical inactivation sterilization is always necessary.

Rinsing / Drying

All instruments must be rinsed with distilled water and dried rapidly and carefully with a clean cloth or with filtered compressed air.

V. CONTROL/ CLEANING/ REPAIRS

In order to prevent corrosion marks or stains from appearing, the instruments should be checked regularly and corrective measures should be taken during the instrument's life span. Check if the instruments are clean, in good condition and working properly.

Following control, some of the instruments may need lubrication, re-sharpening or repairing.

Lubrication can be performed in-house.

Yet, mind the quality of the lubricating solution which has to be water-permeable to permit autoclaving (in this case do not use silicone oil).

CROMA GmbH deals with the repairs of the instruments which it sells.

The instruments must be returned to the supplier after being cleaned according to all the above-mentioned instructions and in the same type of packaging as the one in which they were delivered in order to guarantee appropriate return conditions. Estimates are available on request. If your instrument cannot be repaired, we will contact you to discuss further steps.

VI. STERILIZATION

After placing the instruments in disinfection baskets (place the instruments in the first rank and make sure not to put too many), three sterilization methods may be used:

- Steam sterilization (porous load autoclave): 134 °C, for 18 minutes (theoretical time for ideal conditions)
- Steam sterilization (autoclave): 121 °C for 20 minutes.
- Ethylene oxide sterilization.

In case of steam sterilization, the instruments should not show any trace of oil or of any other impurity or contain any other correcting chemical solution.

Sterilization of an instrument in a closed position is forbidden.

The sterilization time and conditions recommended may vary from country to country.

Please refer to the regulations in your country and the specific procedures required by your hospital/clinic.

VII. RECOMMENDATIONS

- CROMA instruments that are delivered non-sterile must be decontaminated, cleaned, disinfected and/or sterilized before use. Once the instruments have been checked (no impurities visible), the first reprocessing cycle is used as a validation basis of the reprocessing procedure of all instruments.
- Rinsing the instruments with distilled water reduces the risks of stains, tarnishing and corrosion marks.

VIII. EXCHANGE/ GUARANTEE

- Only new instruments that have never been used and/or sterilized or those showing a defect when being used for the first time will be exchanged.
- All of our instruments have a one-year guarantee starting from the invoice date, provided that they are used and cleaned in accordance with the above-mentioned instructions and have not been dropped or subject to any other shock impact.

WIEDERAUFBEREITUNGSANWEISUNG

I. EINFÜHRUNG

Sinn und Zweck der Wiederaufbereitungsanweisung ist es, die Wichtigkeit angemessener Handhabung, Dekontamination, Reinigung, Desinfektion, Sterilisierung und Lagerungspraktiken chirurgischer Instrumente zu betonen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Betriebsdauer und Funktionalität eines chirurgischen Instruments von der sorgfältigen Befolgung der genannten Schritte abhängt.

Ein nicht einwandfrei funktionierendes Instrument stellt einen potentiellen Risikofaktor für den Patienten dar.

Diese Anweisungen sind rein informativ.

Sie müssen dem in Ihrem Land gesetzlich vorgeschriebenen Reglement als auch dem üblichen Prozedere Ihres Krankenhauses/Ihrer Klinik Folge leisten.

Unsere chirurgischen Qualitätsinstrumente aus Edelstahl oder Titan erfüllen strenge Normen, welche von europäischen und internationalen gesetzlich befugten Autoritäten definiert wurden.

Bei unangemessener Lagerung ist eine Korrosion nicht auszuschließen.

Während eines Gebrauchszyklus sollten daher bestimmte Regeln befolgt werden.

II. LAGERBEDINGUNGEN

Die Instrumente sollten folgendermaßen gelagert werden:

- unter angemessenen, trockenen und sauberen Bedingungen ohne Temperaturabweichungen.
- fern von korrosiven Substanzen oder Instrumenten mit verrosteten oder beschädigten Oberflächen, am besten entsprechend des Produktmaterials ohne sie zu stapeln.

Beachten Sie das Gewicht der Instrumente (lagern sie die schwereren unter den leichteren).

III. WARTUNG UND HANDHABUNG

- Chirurgische Instrumente haben einen bestimmten Verwendungszweck (schneiden, halten ...).

Jegliche unzulässige Handhabung des Instruments begünstigt Verschleiß.

- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass das Instrument sauber ist und prüfen Sie seinen Zustand unter einem Mikroskop.

- Die Instrumente müssen nach jeder Verwendung gereinigt werden, um jegliche Spuren von antiseptischer Lösung, Gewebe, zellulären Ablagerungen, Blut oder anderen Ablagerungen zu eliminieren.

Jegliche Substanz die ein Eindringen der Dekontaminierungsflüssigkeit in hohle Instrumente verhindert, muss ebenfalls beseitigt werden.

- Deponieren Sie die gebrauchten Instrumente in geeigneten Behältern für die nachfolgende Reinigung.

Die Instrumente sollten in entsprechender Flüssigkeit zur Reinigung geschickt werden.

- Verlängertes Einweichen in einer physiologischen Kochsalzlösung sollte vermieden werden.

Empfohlen wird destilliertes Wasser.

IV. REINIGUNGSANWEISUNGEN

Gültige Dekontamination und/ oder Inaktivierung als auch Reinigungsabläufe müssen in Zusammenarbeit mit einem Pharmazeuten, Hygieniker und biomedizinischem Ingenieur der einzelnen Kliniken/ Krankenhäuser bezüglich Effizienz, Instandhaltung und Erfüllung nationaler und internationaler Anforderungen (für Frankreich beziehen Sie sich bitte auf das Rundschreiben DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 vom 14. März 2001) aufgesetzt werden.

Die oben genannten Vorgangsweisen müssen sofort nach Gebrauch der Instrumente angewandt werden, um ein Antrocknen jeglicher organischer Ablagerungen an der Instrumentenoberfläche oder in Aushöhlungen zu vermeiden.

Entsprechend der Klassifizierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfolgen ophthalmisch-chirurgische Eingriffe an einem Organ mit hohem Infektionsrisiko aufgrund von NCTA (non conventional transmissible agents) (unkonventionell

übertragbare Krankheitserreger)

Die Instrumente müssen daher separat gehandhabt werden.

Die oben genannten Abläufe sollten folgende Vorgaben beinhalten:

Immersion und Dekontamination

Um das Eintrocknen von Flecken oder Unreinheiten sowie mikrobiologische Kontamination am Instrument zu vermeiden, muss es sofort in ein aldehydfreies Dekontaminierungsbad getaucht werden.

Diese Dekontamination schützt das handhabende Personal als auch die Umwelt und erleichtert weitere Reinigungsabläufe.

Folgende Punkte sollten außerdem in Betracht gezogen werden:

- Befolgen Sie die Benutzungsanweisungen für die Dekontaminationslösung
- Weichen Sie die Instrumente mindestens 15 Minuten ein
- Verwenden Sie chloridfreie Lösung
- Instrumente müssen gänzlich in die Lösung getaucht, Scharniergelenk-Instrumente vollständig geöffnet, zusammengesetzte Instrumente zerlegt werden.
- Speziell für die Dekontamination vorgesehene Siebschalen in Operationssälen müssen nach jedem chirurgischen Eingriff ausgetauscht werden.
- Spülen Sie mit destilliertem Wasser.

Reinigung

Die Reinigung kann entweder in einer Maschine, mit Ultraschall oder händisch erfolgen, falls noch sichtbare Unreinheiten nach der Dekontamination bestehen.

Ungeachtet der angewendeten Reinigungsmethoden müssen die Nutzungsanweisungen für das Reinigungsmittel befolgt werden, da einige sowohl für die Reinigung als auch für die Dekontamination verwendet werden können.

Manuelle Reinigung

- Die manuelle Reinigung der Griffe erfolgt mit einer Plastikbürste, die Reinigung der Spitze mit einem weichen, sauberen Stoff.

Metallbürsten dürfen nicht eingesetzt werden.

- Spülen Sie gründlich mit destilliertem Wasser.

Mechanische Reinigung

- Die Anweisungen des Herstellers sind zu befolgen
- Bei der Positionierung der Instrumente stellen Sie sicher, dass sie sich gegenseitig nicht berühren und dass sie nicht schadhaft sind.

Berücksichtigen Sie das Gewicht und die Form der Instrumente.

Schwere Instrumente sollten unter leichteren positioniert werden, Hohlinstrumente müssen in einen Desinfektionskorb platziert werden.

Instrumente müssen so positioniert werden, dass die maschinelle Reinigung an allen Stellen erfolgen kann; Scharniergelenkinstrumente müssen gänzlich geöffnet, zusammengesetzte Instrumente zerlegt werden.

- Überladen Sie weder Maschine noch Desinfektionskorb

Ultraschallreinigung

Ultraschallreinigung wird nicht empfohlen.

Wird diese Reinigungsmethode trotzdem angewandt, müssen folgende grundlegende Maßnahmen beachtet werden:

- Die Anweisungen des Herstellers müssen befolgt werden.
- Die Temperatur muss bei 45 °C gehalten werden.
- Die Reinigung sollte in einem Frequenzbereich zwischen 25 und 50 KHz erfolgen.
- Der Ultraschall-Reinigungszyklus sollte nicht länger als 5 Minuten dauern (mit Ausnahme der Entgasungszeit).
- Verwenden Sie ein entsprechendes Reinigungsmittel
- Empfindliche Instrumente sollten gesondert behandelt werden. Metallteile besonders empfindlicher Instrumente sollten anderes Metall nicht berühren.

NCTA Inaktivierung

Überträger der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, unkonventionell übertragbare Krankheitserreger (NCTA), auch bekannt als „Prionen“, sind besonders resistent gegen zahlreiche physikalische und chemische Behandlungen.

Da die derzeitigen Behandlungen nicht oder nur teilweise effektiv sind (130 °C/ 226 °F Temperatur in feuchter Umgebung, Ultraschall, UV, Äthanol, Formaldehyd ...), sollte ein besonderer Inaktivierungsprozess in die Vorbehandlung inkludiert werden.

Für Frankreich beachten Sie bitte die Empfehlungen des französischen Gesundheitsministeriums bezüglich der „zu befolgenden Maßnahmen in der Chirurgie [...] hinsichtlich der Übertragungsrisiken der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit“.

- Eine physikalische Inaktivierung ist zu bevorzugen (zwischen 134 °C und 138 °C für 18 Minuten, Autoklav-Sterilisation bei porösen Instrumenten).
- Die Verwendung von Natriumhypochlorit ist unbedingt zu vermeiden.
- Bei chemischer Inaktivierung mit destilliertem Wasser spülen.

Bei Instrumenten aus Titan kann eine Behandlung mit Natriumhydroxid das Schwinden der Eloxal-Schicht verursachen. Es erfolgt allerdings keine Beeinträchtigung der Instrumentenoberfläche.

Trotz der chemischen Inaktivierung ist eine Sterilisation immer notwendig.

Spülen/ Trocknen

Alle Instrumente müssen mit destilliertem Wasser gespült sowie rasch und vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder gefilterter Druckluft getrocknet werden.

V. KONTROLLE/ REINIGUNG/ REPARATUREN

Um jegliche Korrosionsflecken zu vermeiden, müssen die Instrumente regelmäßig kontrolliert und, falls notwendig, Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.

Kontrollieren Sie, ob die Instrumente sauber und in gutem Zustand sind sowie richtig funktionieren.

Überprüfen Sie im Anschluss, ob die Instrumente geölt, geschärft oder repariert werden müssen.

Ein Ölen der Instrumente kann intern erfolgen.

Beachten Sie jedoch die Qualität der Ölung: sie muss wasserdurchlässig sein um ein Autoklavieren zu ermöglichen (in diesem Fall sollten Sie kein Silikonöl verwenden).

Sämtliche Reparaturen der von CROMA GmbH hergestellten Instrumente werden von CROMA GmbH durchgeführt.

Für Reparaturen müssen die Instrumente wie oben beschrieben gereinigt und in der gleichen Verpackung, in der sie geliefert wurden, an den Hersteller zurückgesendet werden, um eine adäquate Retournierung zu gewährleisten.

Kostenvoranschläge erfolgen nach Anfrage.

Sollte eine Reparatur Ihres Instruments nicht möglich sein, werden wir bezüglich der weiteren Vorgehensweisen mit Ihnen in Kontakt treten.

VI. STERILISATION

Nach Positionierung der Instrumente im Desinfektionskorb (platzieren Sie die Instrumente in der ersten Reihe aber überfüllen Sie diese nicht) können drei verschiedene Sterilisationsmethoden angewendet werden:

- Dampf-Sterilisation (Autoklav-Sterilisation für poröse Instrumente): 134 °C, für 18 Minuten (theoretische Zeit für den Idealzustand)
- Dampf-Sterilisation (Autoklav-Sterilisation), 121 °C für 20 Minuten
- Äthylenoxid-Sterilisation

Im Fall einer Dampf-Sterilisation sollten die Instrumente keinerlei Spuren an Öl oder anderen Verunreinigungen sowie chemischen Lösungen aufweisen.

Scharniergelenk-Instrumente dürfen niemals im geschlossenen Zustand sterilisiert werden.

Empfohlene Sterilisationszeit und -bedingungen können von Land zu Land variieren.

Bitte beachten Sie die Bestimmungen Ihres Landes und die vorgeschriebenen spezifischen Abläufe Ihrer Klinik.

VII. EMPFEHLUNGEN


- Instrumente von CROMA, die nicht steril geliefert wurden, müssen vor Erstbenutzung dekontaminiert, gereinigt, desinfiziert und/ oder sterilisiert werden.

Sobald die Instrumente überprüft wurden (keine sichtbaren Verunreinigungen), sollte der erste Wiederaufbereitungszyklus als Basis für alle weiteren Wiederaufbereitungsprozesse gelten.

- Das Spülen der Instrumente mit destilliertem Wasser reduziert das Risiko der Entstehung von Flecken, Trübung und Rostmalen.


VIII. AUSTAUSCH/ GARANTIE

- Nur neue, unbenutzte und noch nicht sterilisierte sowie bei der Erstanwendung defekte Instrumente werden ausgetauscht.
- Alle unsere Instrumente verfügen über ein Jahr Garantie, beginnend mit dem Rechnungsdatum, vorausgesetzt, dass eine wie oben beschriebene Reinigung und Nutzung erfolgt ist, die Instrumente nicht fallen gelassen oder anderen Stoß- und Schlageinwirkungen ausgesetzt wurden.

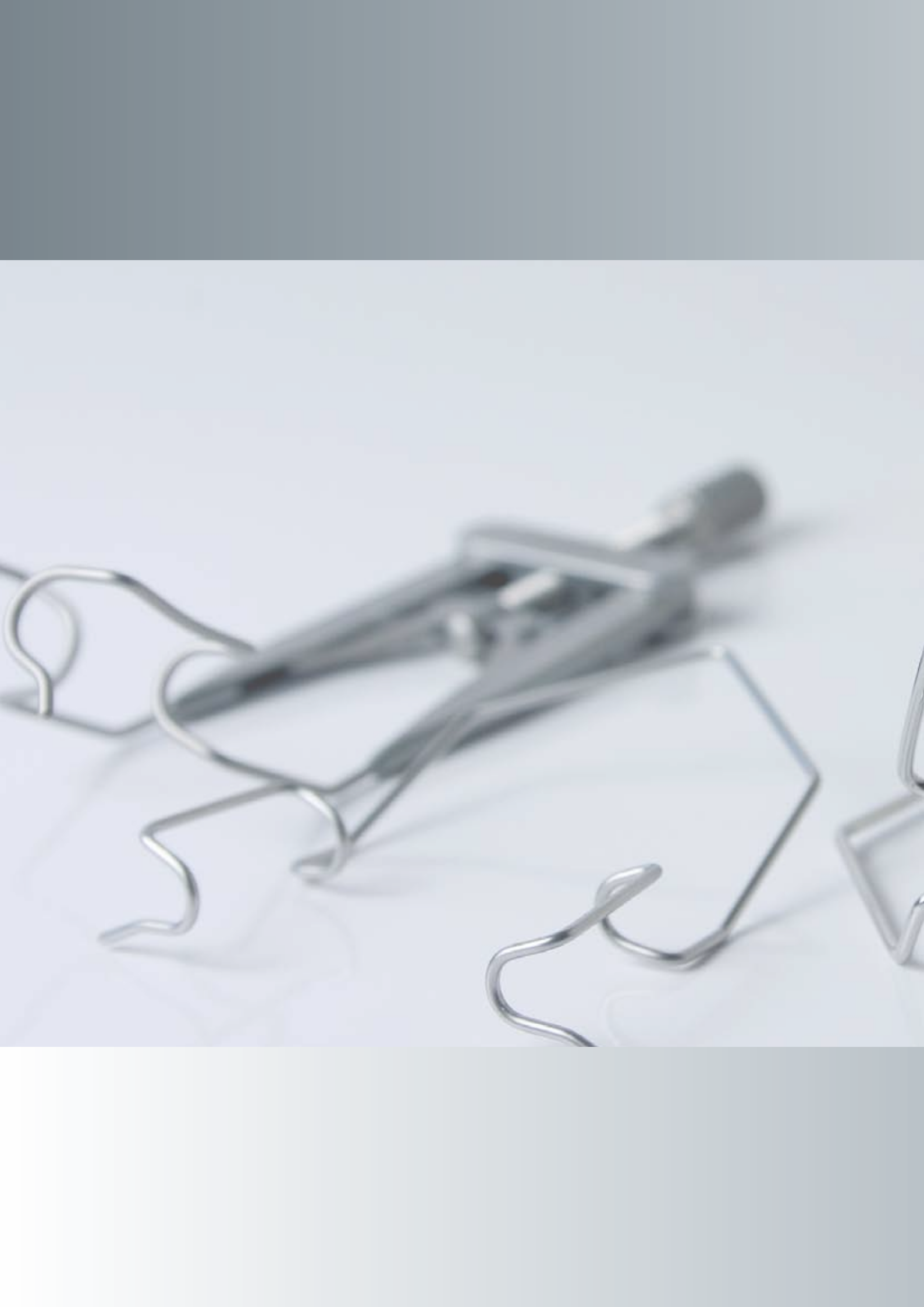

Blépharostats
Eye specula
Lidsperrer



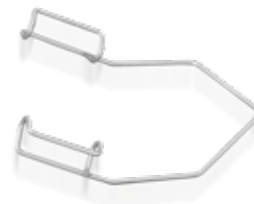

E-10000*

Blépharostat de BARRAQUER, enfant, fenêtres de 10 mm
BARRAQUER wire speculum, small, child size, 10 mm blades
BARRAQUER Lidsperrer, klein, 10 mm



E-10001*

Blépharostat de BARRAQUER, adulte, fenêtres de 15 mm
BARRAQUER wire speculum, large, adult size, 15 mm blades
BARRAQUER Lidsperrer, groß, 15 mm




E-10002

Blépharostat de BARRAQUER, bébé, fenêtres de 5 mm
BARRAQUER speculum, paediatric size, 5 mm blades
BARRAQUER Drahtlidsperrer, für Kleinkinder, 5 mm



E-10005*

Blépharostat de KRATZ-BARRAQUER, fenêtres ouvertes
KRATZ-BARRAQUER wire speculum with open blades
KRATZ-BARRAQUER Drahtlidsperrer, offen

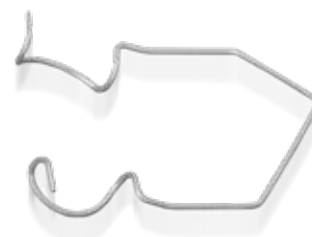

E-10006

Blépharostat temporal, fenêtres rondes et ouvertes
Temporal wire speculum, open and round blades
TEMPORAL Drahtlidsperrer, gefenstert

Blépharostats

Eye specula

Lidsperrer

**E-10011**

Blépharostat de BARRAQUER, fenêtres pleines
BARRAQUER wire speculum, solid blades
BARRAQUER Drahtlidsperrer, geschlossen

**E-10061***

Blépharostat de CASTROVIEJO standard, à vis, fenêtres 16 mm
CASTROVIEJO standard speculum, 16 mm blades, adjustable
CASTROVIEJO Lidsperrer geschlossen, mit Feststellschraube, 16 mm

**E-10061/S**

Blépharostat de CASTROVIEJO, à vis, fenêtres ouvertes 16 mm
CASTROVIEJO speculum, adjustable, 16 mm open blades
CASTROVIEJO Lidsperrer offen, mit Feststellschraube, 16 mm

**E-40100***

Blépharostat de LIEBERMANN, spécial phaco, à vis, angulé, fenêtres ouvertes
LIEBERMANN wire speculum, for phaco, adjustable, angled, open blades
LIEBERMANN Drahtlidsperrer offen, abgewinkelt, mit Feststellschraube



Pinces
Forceps
Pinzetten



Pinces capsulorhexis
Capsulorhexis forceps
Kapsulorhexis-Pinzetten

22

Pinces standards

Standard forceps

Standard-Pinzetten



D-7311*



Pince à capsulorhexis d'UTRATA, droite, ultra fine
 UTRATA capsulorhexis forceps, straight, very delicate
 UTRATA Kapsulorhexis-Pinzette, gerade, extra fein



D-7315*



Pince à capsulorhexis de MASKET, courbe, ultra fine
 MASKET capsulorhexis forceps, curved, with very delicate tip
 MASKET Kapsulorhexis-Pinzette, gebogen, extra fein



2760B-3150



Pince à capsulorhexis de CORYDON, courbe, en titane
 CORYDON capsulorhexis forceps, curved, titanium
 CORYDON Kapsulorhexis-Pinzette, Titan, gebogen



2760B-3127



Pince à capsulorhexis de CORYDON, droite, en titane
 CORYDON capsulorhexis forceps, straight, titanium
 CORYDON Kapsulorhexis-Pinzette, Titan, gerade

Pinces capsulorhexis
Capsulorhexis forceps
Kapsulorhexis-Pinzetten

Pinces pour mini-micro incisions



Mini-micro incision forceps

Mini-/ Mikroinzision-Pinzetten



F-2055


Pince à capsulorhexis d'INAMURA, en titane
INAMURA capsulorhexis forceps, titanium
INAMURA Kapsulorhexis-Pinzette, Titan

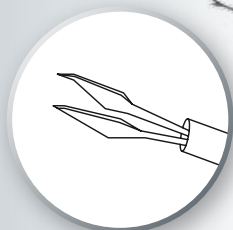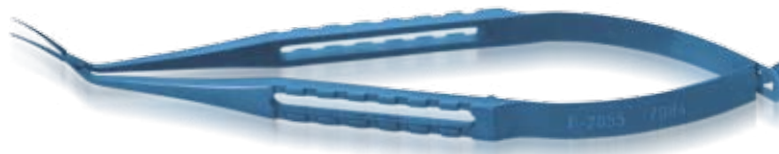

FR-2266

Pince à capsulorhexis d'IKEDA 23G, à commande distale, en titane
IKEDA capsulorhexis forceps 23G, squeeze handle, titanium
IKEDA Kapsulorhexis-Pinzette 23 G, distaler Griff, Titan




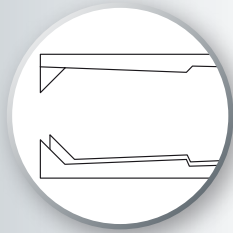

D-7280*




Pince de BONN, modèle long, à plateaux, 1x2 dents de 0.12 mm
 BONN forceps, long model, with tying platform, 1x2 teeth 0.12 mm
 Irispinzette Modell BONN, lang, gerade, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,12 mm

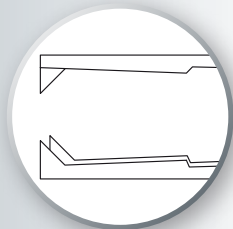

D-7500




Pince à suture de CASTROVIEJO, à plateaux, 1x2 dents de 0.12 mm
 CASTROVIEJO suturing forceps, with tying platform, 1x2 teeth 0.12 mm
 Nahtpinzette nach CASTROVIEJO, gerade, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,12 mm

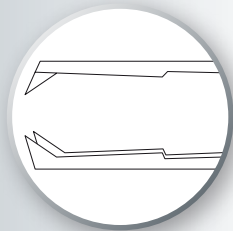

D-7501*




Pince à suture de CASTROVIEJO, à plateaux, 1x2 dents de 0.3 mm
 CASTROVIEJO suturing forceps, with tying platform, 1x2 teeth 0.3 mm
 Nahtpinzette nach CASTROVIEJO, gerade, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,3 mm

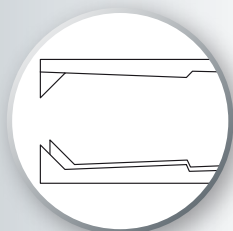

D-7540*




Pince de BONN, modèle long, à plateaux, 1x2 dents de 0.1 mm
 BONN forceps, long model, with tying platform, 1x2 teeth 0.1 mm
 Irispinzette Modell BONN, lang, gerade, chirurgisch, 0,1 mm

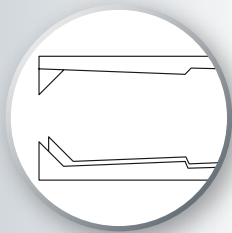**D-7550****Pince de BONN, modèle court 70 mm, à plateaux, 1x2 dents de 0.12 mm*


BONN forceps, short model 70 mm, with tying platform, 1x2 teeth 0.12 mm

Irispinzette Modell BONN, kurz, 70 mm gerade, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,12 mm

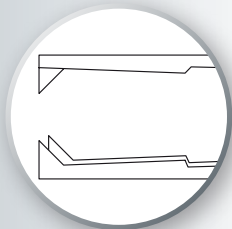**2756B-2029***Pince de BONN, en titane*


BONN forceps, titanium

Irispinzette Modell BONN, gerade, chirurgisch, Titan

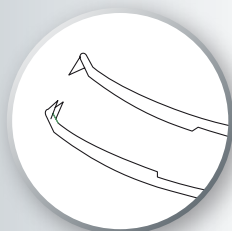**D-8110****Pince COLIBRI, à plateaux, 1x2 dents de 0.12 mm*

COLIBRI forceps, with tying platform, 1x2 teeth 0.12 mm


KOLIBRI Pinzette, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,12 mm

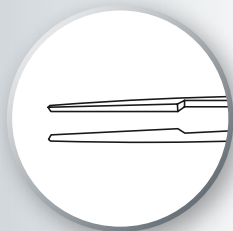

D-7150*




Pince à fils de JAFFE (TROUTMAN), plateaux mousses 6 mm, droite, pour monofil 10/0
 JAFFE (TROUTMAN) tying forceps, smooth jaws with 6 mm long platform, straight, for 10/0 sutures
 Fadenpinzette nach JAFFE (TROUTMAN), gerade, 6 mm Fadenplatte, für 10/0 Nahtmaterial

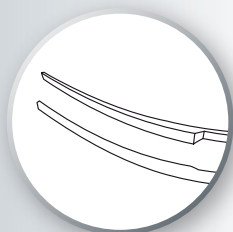


D-7151*




Pince à fils de JAFFE (TROUTMAN), plateaux mousses 6 mm, courbe, pour monofil 10/0
 JAFFE (TROUTMAN) tying forceps, smooth jaws with 6 mm long platform, curved, for 10/0 sutures
 Fadenpinzette nach JAFFE (TROUTMAN), gebogen, 6 mm Fadenplatte, für 10/0 Nahtmaterial

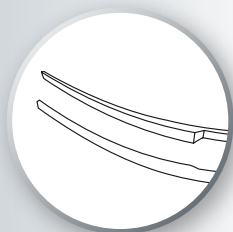


D-8051*

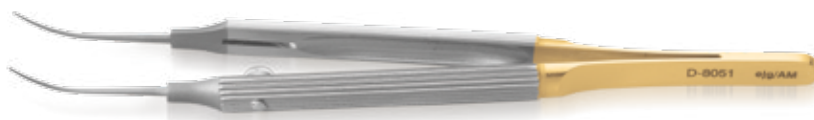

Pince à fils de TENNANT, plateaux 6 mm, très fine, pour monofil 10/0
 TENNANT tying forceps, with 6 mm long platform, delicate, for 10/0 sutures
 Fadenpinzette nach TENNANT, 6 mm Fadenplatte, fein, für 10/0 Nahtmaterial

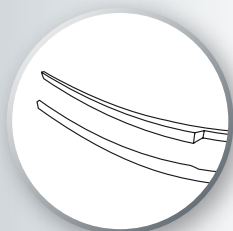


2756B-2097

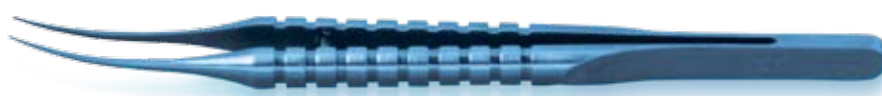

Pince de TROUTMAN, courbe, en titane
 TROUTMAN forceps, curved, titanium
 Fadenpinzette nach TROUTMAN, gebogen, Titan


Pinces de Paufigue
Paufique forceps
Nahtpinzette nach Paufigue

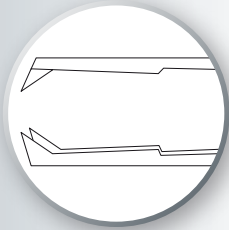

D-7790*




Pince à suture de PAUFIQUE, à plateaux, 1x2 dents de 0.3 mm
 PAUFIQUE suture forceps, with tying platform, 1x2 teeth 0.3 mm
 Nahtpinzette nach PAUFIQUE, gerade, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,3 mm

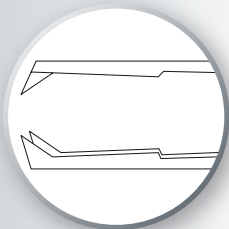

D-7791*




Pince à suture de PAUFIQUE, à plateaux, 1x2 dents de 0.5 mm
 PAUFIQUE suture forceps, with tying platform, 1x2 teeth 0.5 mm
 Nahtpinzette nach PAUFIQUE, gerade, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,5 mm

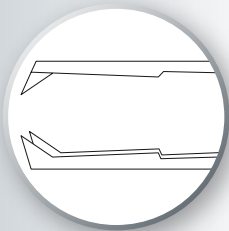

D-7792*




Pince à suture de PAUFIQUE, à plateaux, 1x2 dents de 0.9 mm
 PAUFIQUE suture forceps, with tying platform, 1x2 teeth 0.9 mm
 Nahtpinzette nach PAUFIQUE, gerade, mit Fadenplatte, chirurgisch, 0,9 mm

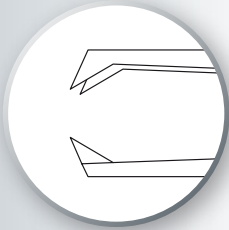

D-7730*



Pince à fixer le muscle droit supérieur d'ELSCHNIG, 1x2 dents obliques
ELSCHNIG superior rectus fixation forceps, straight, 1x2 angled teeth
Zügelnahtpinzette nach ELSCHNIG, chirurgisch

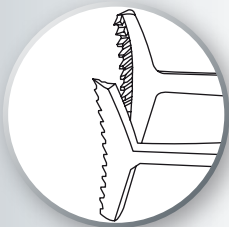

D-7761




Pince à fixer de GREEN (DUJARDIN), à dents horizontales, écartement des mors 10 mm
GREEN (DUJARDIN) forceps, horizontal teeth, 10 mm wide jaws
Fixierpinzette nach GREEN (DUJARDIN), 10,0 mm



D-8361



Pince à chalazion de DESMARRES, extrémité ovale, 26 mm
DESMARRES chalazion forceps, oval, 26 mm
Chalazionpinzette nach DESMARRES, oval, 26 mm

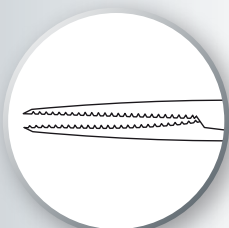


D-9710*



Pince moustique de HARTMANN, très fine, 9.5 cm, droite
HARTMANN mosquito forceps, delicate, 9.5 cm long, straight
Arterienklemme nach HARTMANN, gerade, 9,5 cm

Autres pinces
Other forceps
Andere Pinzetten

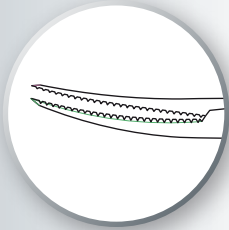

D-9711*




Pince moustique de HARTMANN, très fine, 9.5 cm, courbe
HARTMANN mosquito forceps, delicate, 9.5 cm long, curved
Arterienklemme HARTMANN, gebogen, 9,5 cm



D-9723*



Pince de DIEFFENBACH (WECKER), mors striés, 5 cm, courbe
DIEFFENBACH (WECKER) serrefine, serrated jaws, 5 cm long, curved
DIEFFENBACH-Klemme, gebogen, 5 cm

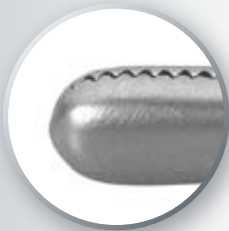

D-9731



Pince de JOHN HOPKINS, mors striés, 6.5 cm, courbe
JOHN HOPKINS serrefine, serrated jaws, 6.5 cm long, curved
Gefäßklemme nach JOHN HOPKINS, 6,5 mm



Ciseaux
Scissors
Scheren





A-1330*



Micro ciseaux de KATZIN, courbes, lames coudées à droite

KATZIN micro scissors, curved, right angled blades

Federschere nach KATZIN, rechts, gebogen, stumpf



A-1340*



Micro ciseaux de KATZIN, courbes, lames coudées à gauche

KATZIN micro scissors, curved, left angled blades


Federschere nach KATZIN, links, gebogen, stumpf

Ciseaux de Vannas et Noyes
Vannas and Noyes scissors
Vannas und Noyes Scheren

Ciseaux standards

Standard scissors


Standardscheren

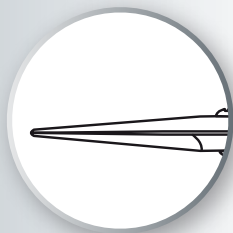


A-1780*



Ciseaux de NOYES (VANNAS), droits, lames courtes, pointus, 10.5 cm
 NOYES (VANNAS) scissors, straight, small blades, sharp, 10.5 cm
 Federschere nach NOYES (VANNAS), gerade, 10,5 cm, spitz

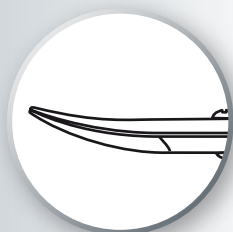

A-1790*

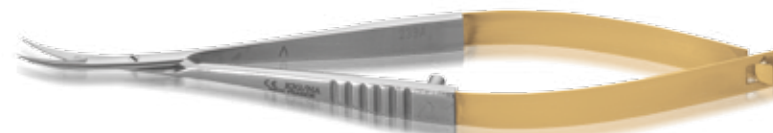

Ciseaux de NOYES (VANNAS), courbes, lames courtes, pointus, 10.5 cm
 NOYES (VANNAS) scissors, curved, small blades, sharp, 10.5 cm
 Federschere nach NOYES (VANNAS), gebogen, 10,5 cm, spitz



A-1793*



Ciseaux de NOYES (VANNAS), courbes, lames courtes, mousses, 10.5 cm
 NOYES (VANNAS) scissors, curved, small blades, blunt, 10.5 cm
 Federschere nach NOYES (VANNAS), gebogen, 10,5 cm, stumpf


Ciseaux de Vannas et Noyes
Vannas and Noyes scissors
Vannas und Noyes Scheren

34

Micro ciseaux

Micro scissors


Mikroscheren

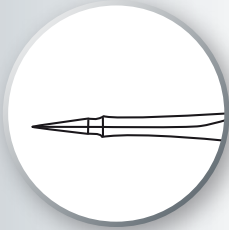


A-1920*




Ciseaux de VANNAS, droits, micro lames 11 mm, pointus
VANNAS scissors, straight, 11 mm micro blades, sharp
Federschere nach VANNAS, gerade, spitz, 11 mm

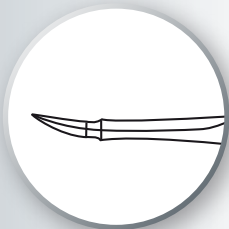

A-1930*

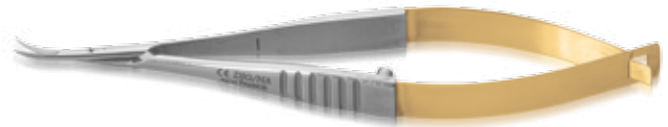


Ciseaux de VANNAS, courbes, micro lames 11 mm, pointus
VANNAS scissors, curved, 11 mm micro blades, sharp
Federschere nach VANNAS, gebogen, spitz, 11 mm

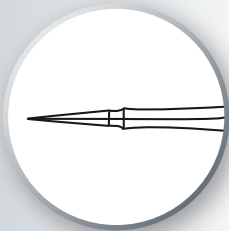


A-1980*



Ciseaux de VANNAS, droits, micro lames 12 mm, mousses
VANNAS scissors, straight, 12 mm micro blades, blunt
Federschere nach VANNAS, gerade, stumpf, 12 mm

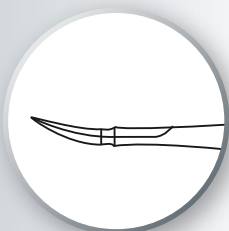


A-1990*

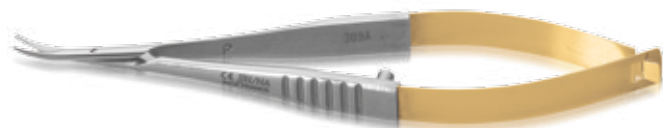

Ciseaux de VANNAS, courbes, micro lames 12 mm, mousses
VANNAS scissors, curved, 12 mm micro blades, blunt
Federschere nach VANNAS, gebogen, stumpf, 12 mm

Ciseaux d'ophtalmologie
Ophthalmic scissors
Augenscheren

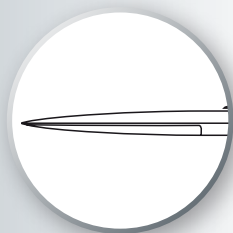


A-3320*

Ciseaux d'ophtalmologie standards, droits, pointus
 Eye scissors, standard, straight, pointed tips
Augenschere, gerade, spitz




A-3321*

Ciseaux d'ophtalmologie standards, courbes, pointus
 Eye scissors, standard, curved, pointed tips
Augenschere, gebogen, spitz

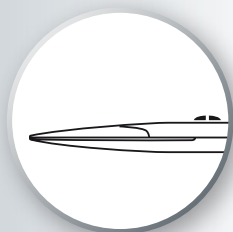

A-3325*


Ciseaux de STEVENS, droits, mousses
 STEVENS scissors, straight, blunt
Sehnenschere nach STEVENS, gerade, stumpf

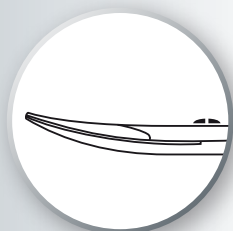


A-3326*

Ciseaux de STEVENS, courbes, mousses
 STEVENS scissors, curved, blunt
Sehnenschere nach STEVENS, gebogen, stumpf



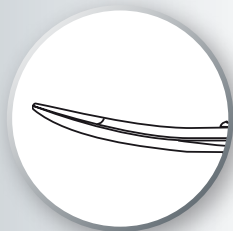

A-1500*

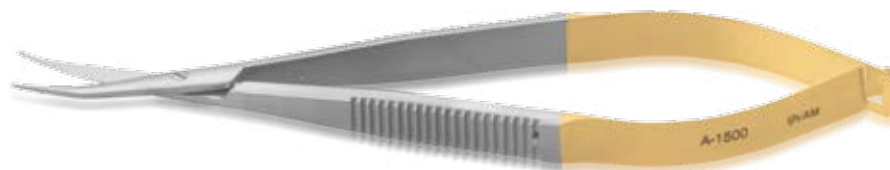


Ciseaux de WESCOTT, courbes, lames 13 mm, mousses
WESCOTT scissors, curved, 13 mm blades, blunt
Federschere nach WESCOTT, gebogen, stumpf, 13 mm



A-1792*



Ciseaux de NOYES (CASTROVIEJO), courbes, micro lames, mousses, 12 cm
NOYES (CASTROVIEJO) scissors, curved, small blades, blunt, 12 cm
Federschere nach NOYES (CASTROVIEJO), gebogen, stumpf, 12 cm

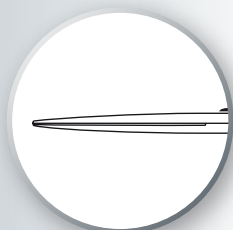

A-3330*



Ciseaux à strabisme, droits, mousses
Strabismus scissors, straight, blunt
Strabismusschere, gerade, stumpf




A-3331*



Ciseaux à strabisme, courbes, mousses
Strabismus scissors, curved, blunt
Strabismusschere, gebogen, stumpf



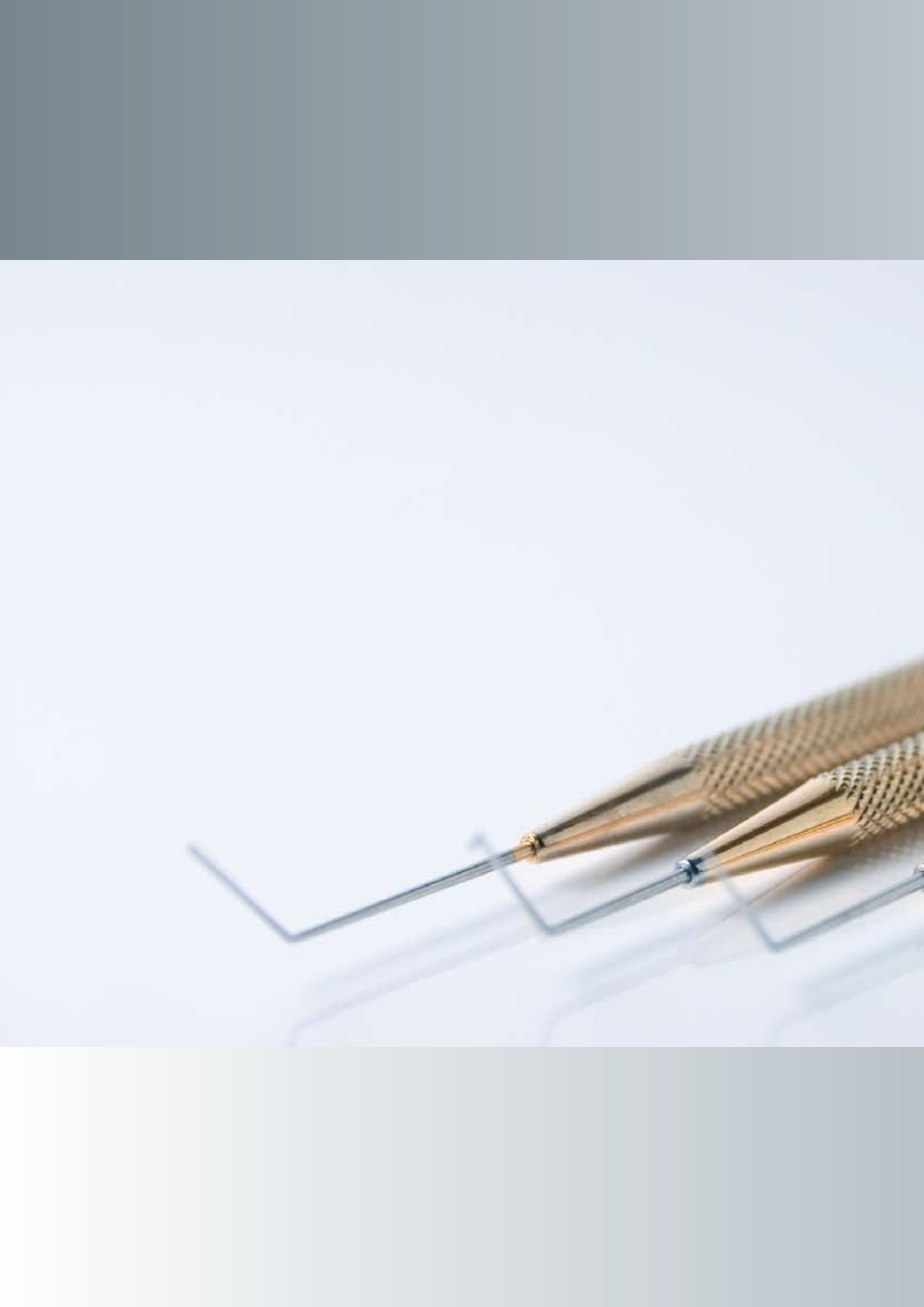

Crochets
Hooks
Haken



**C-5311****Crochet phaco, bout mousse, diamètre 0.4 mm*

Positioning hook for phaco, blunt tip, 0.4 mm diameter

Manipulator, stumpf, abgewinkelt, 0,4 mm Durchmesser**C-5201****Crochet à iris et à implant de KUGLEN, coudé*

KUGLEN iris hook and lens manipulator, angled

Irishaken nach KUGLEN, abgewinkelt**C-5206****Crochet à implant de LESTER, coudé, olivaire, diamètre 0.25 mm*

LESTER lens pusher, angled, bulbous tip, 0.25 mm diameter

Manipulator nach LESTER, abgewinkelt, knollige Spitze, 0,25 mm Durchmesser**C-5260****Crochet à implant de LEWICKY (SINSKEY-BURRATO), coudé, mousse, diamètre 0.15 mm*

LEWICKY (SINSKEY-BURRATO) I.O.L. hook, angled, blunt tip, 0.15 mm diameter

Positionshäkchen nach LEWICKY (SINSKEY-BURRATO), abgewinkelt, stumpf, 0,15 mm Durchmesser



C-5268*

Crochet à noyau de CLAYMAN, coudé, bout fourche
 CLAYMAN nucleus rotator, angled, notched tip
 Linsenkernrotierer nach CLAYMAN, abgewinkelt, gekerbte Spitze



C-5269*

Crochet de PISACANO, coudé, bout olivaire aplati
 PISACANO nucleus rotator, angled, flat blunt tip
 Linsenkernrotierer nach PISACANO, abgewinkelt, flache, stumpfe Spitze



C-5273

Crochet de DRYSDALE diviseur de noyau, bout olivaire aplati
 DRYSDALE nucleus manipulator, tip paddle shaped
 Phaco Chopper nach DRYSDALE, paddelförmig



C-5276*

Crochet phaco de THIBAUT (NAHAGARA), bout mousse, extrémité coudée à 60°
 THIBAUT (NAHAGARA) phaco chopper, blunt, 60° angled tip
 Phaco Chopper nach THIBAUT (NAHAGARA), stumpf, abgewinkelt, 60°





Porte-aiguilles
Needle holders
Nadelhalter





B-3552*

Porte-aiguille de BARRAQUER, courbe, avec verrou, mors ultra fins
BARRAQUER needle-holder, curved, with lock, very delicate jaws
Nadelhalter nach BARRAQUER, gebogen, mit Sperre, sehr fein



B-3553*

Porte-aiguille de BARRAQUER, courbe, sans verrou, mors ultra fins
BARRAQUER needle-holder, curved, without lock, very delicate jaws
Nadelhalter nach BARRAQUER, gebogen, ohne Sperre, sehr fein



B-3573*

Porte-aiguille de BARRAQUER, courbe, sans verrou, mors fins
BARRAQUER needle-holder, curved, without lock, delicate jaws
Nadelhalter nach BARRAQUER, gebogen, ohne Sperre, fein



B-3592*

Porte-aiguille de CASTROVIEJO, courbe, à verrou, mors fins
CASTROVIEJO needle-holder, curved, with lock, delicate jaws
Nadelhalter nach CASTROVIEJO, gebogen, mit Sperre, fein



B-3593*

Porte-aiguille de CASTROVIEJO, courbe, mors fins, sans verrou
CASTROVIEJO needle-holder, curved, delicate jaws, without lock
Nadelhalter nach CASTROVIEJO, gebogen, ohne Sperre, fein



B-3707

Micro porte-aiguille de BARRAQUER (BREGEAT), manche large, mors courts et droits
BARRAQUER (BREGEAT) micro needle-holder, wide handle, short and straight jaws
Mikro-Nadelhalter nach BARRAQUER (BREGEAT), breiter Griff, kurz und gerade



2756B-2053

Porte-aiguille ultra-fin, mors courbes, en titane
Needle-holder, extra delicate, curved jaws, titanium
Nadelhalter, sehr fein, gebogen, Titan



Canules
Cannulae
Kanülen





F-11000*

Canule de RYCROFT 30G, pour injection d'air, coudée, 30G, orifice 0.3 mm
RYCROFT air injection cannula, angled, 30G, opening 0.3 mm
Luftkanüle nach RYCROFT, 0,3 mm, 30 G



F-11140*

Canule de TROUTMAN, embout olivaire, 0.5 mm, 25G
TROUTMAN cannula, bulbous tip, 0.5 mm, 25G
Kanüle nach TROUTMAN, olivenförmig, 0,5 mm, 25 G



F-11360*

Canule de JENSEN pour polir la capsule, embout olivaire dépoli, orifice 0.5 mm, légèrement courbée, 25G
JENSEN Capsule Polisher, olive tip sand-blasted, front opening 0.5 mm, slightly curved, 25G
Polierkanüle nach JENSEN, olive Spitze, sandgestrahlt, 0,5 mm, 25 G



F-11985*

Canule de SCHEIE (CHAZALON) pour extraction du cortex, 23G, modèle long, courbe, orifice d'aspiration latéral de 0.33 mm
SCHEIE (CHAZALON) cortex extractor, 23G, long model, curved, lateral 0.33 mm aspiration hole
Abaugkanüle nach SCHEIE (CHAZALON), 23 G, gebogen, 0,33 mm
Aspirationsöffnung an der Seite





F-12060*

Canule d'irrigation de BINKHORST, embout mousse, 22G, droite, orifice 0.7 mm
BINKHORST irrigating cannula, smooth blunt tip, front opening, 22G, straight, opening 0.7 mm
Spülkanüle nach BINKHORST, 22 G, glatte stumpfe Spitze, gerade, 0,7 mm



F-12061

Canule de BINKHORST 22G, courbée à gauche, orifice 0.7 mm
BINKHORST cannula 22G, bent on the left, opening 0.7 mm
Spülkanüle nach BINKHORST, 22 G, glatte stumpfe Spitze, angewinkelt, 0,7 mm, links



F-12062

Canule de BINKHORST 22G, courbée à droite, orifice 0.7 mm
BINKHORST cannula 22G, bent on the right, opening 0.7 mm
Spülkanüle nach BINKHORST, 22 G, glatte stumpfe Spitze, angewinkelt, 0,7 mm, rechts



F-3102*

Canule de CHARLEUX 23G, sans biseau, 3 cm
CHARLEUX cannula 23G, without bevel, 3 cm
Spül-/Saugkanüle nach CHARLEUX, 23 G, ohne Anschrägung, 3 cm





F-3100*

Canule de CHARLEUX 23G, irrigation, aspiration
CHARLEUX cannula 23G, irrigation, aspiration
Spül-/Saugkanüle nach CHARLEUX, 23 G



F-3105*

Canule de CHARLEUX longue 23G, 3 cm
CHARLEUX cannula 23G long model, 3 cm
Spül-/Saugkanüle nach CHARLEUX, 23 G, langes Modell, 3 cm



F-3160*

Canule à hydrodissection horizontale 25G, bout aplati
Hydrodissection cannula, horizontal, 25G, flat tip
Hydrodissektionskanüle, waagrecht, 25 G, flach



F-3170*

Canule à voie lacrymale de GALEZOWSKI 23G, droite, fine
GALEZOWSKI lachrymal cannula 23G, straight, delicate
GALEZOWSKI Lakrimalkanüle 23 G, gerade, fein





F-3120*



Canule S.F.O., courbe, extrémité droite, orifice 0.35 mm
 S.F.O. cannula, curved with straight tip, opening 0.35 mm
 Spül- und Saugkanüle, gebogen mit gerader Spitze, 0,35 mm



F-3130*



Canule S.F.O., CHARLEUX, courbe avec extrémité droite, orifice 0.35 mm
 S.F.O. CHARLEUX cannula, curved with straight tip, opening 0.35 mm
 Spül- und Saugkanüle nach CHARLEUX, gebogen mit gerader Spitze, 0,35 mm



F-3140*



Canule S.F.O., courbe et angulée, orifice 0.35 mm
 S.F.O. cannula, curved and angled, opening 0.35 mm
 Spül- und Saugkanüle, gebogen und angewinkelt, 0,35 mm

Voies lacrymales
Lachrymal instruments
Lakrimalinstrumente





G-12710

Dilatateur lacrymal pour enfant, très fin
Lachrymal dilator infant size, very fine blunt tip
Tränenwegsonde für Kinder, sehr feine, stumpfe Spitze

G-12730

Dilatateur lacrymal taille 1, fin
Lachrymal dilator size 1, fine taper
Tränenwegsonde, Größe 1, schmaler Konus

G-12731

Dilatateur lacrymal taille 2, moyen
Lachrymal dilator size 2, medium taper
Tränenwegsonde, Größe 2, mittlerer Konus

G-12732

Dilatateur lacrymal taille 3, fort
Lachrymal dilator size 3, heavy taper
Tränenwegsonde, Größe 3, steiler Konus



G-12610-04

Sonde à voie lacrymale taille 0000/000
Lachrymal probe, size 0000/000
Tränenwegsonde, 0000/000

G-12611-02

Sonde à voie lacrymale taille 00/0
Lachrymal probe, size 00/0
Tränenwegsonde, 00/0

G-12612-12

Sonde à voie lacrymale taille 1/2
Lachrymal probe, size 1/2
Tränenwegsonde, 1/2

G-12613-34

Sonde à voie lacrymale taille 3/4
Lachrymal probe, size 3/4
Tränenwegsonde, 3/4

G-12614-56

Sonde à voie lacrymale taille 5/6
Lachrymal probe, size 5/6
Tränenwegsonde, 5/6



Instruments divers
Other instruments
Andere Instrumente





C-5420*



Anse à cristallin de NEW ORLEANS (SNELLEN), courbe
NEW ORLEANS (SNELLEN) Lens Loop, curved
Starschlinge nach NEW ORLEANS (SNELLEN), gebogen



C-5554*

Spatule de MODELL GIESSEN (Ecarteur de BONN), 16.5 cm, extrémité aplatie
MODELL GIESSEN Spatula (BONN expender spatula), 16.5 cm, flat tip
Wundspatel MODELL GIESSEN, 16,5 cm, flache Spitze



C-5904*



Scarificateur de cornée de KUHNT, non tranchant
KUHNT Corneal Scarifier, blunt
Hornhautschaber nach KUHNT, stumpf



C-6635*



Marqueur de THORNTON, diamètre 13 mm, ouvert
THORNTON marking instrument, 13 mm diameter, open
Fixationsring nach THORNTON, 13 mm Durchmesser, geöffnet



C-6350*




Marqueur de MENDEZ, diamètre intérieur 12 mm
 MENDEZ degree Gauge, 12 mm inner diameter
 Messinstrument nach MENDEZ, 12 mm Innendurchmesser



B-4200*



Compas de CASTROVIEJO, ouverture 20 mm
 CASTROVIEJO caliper, opening 20 mm
 Zirkel nach CASTROVIEJO, 20 mm

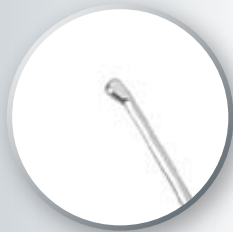

C-5574*



Spatule à vitré de BARRAQUER, 12 mm, extrémité boule
 BARRAQUER vitreous spatula, 12 mm long, with a small ball at the end
 Vitrektomiespatel nach BARRAQUER, 12 mm lange, ballförmige Spitze



Injecteurs et pinces I/O
IOL injectors and forceps
IOL-Injektoren und Pinzetten



Injecteurs et pinces LIO
IOL injectors and forceps
IOL-Injektoren und Pinzetten

62

Injecteurs

IOL Injectors

IOL-Injektoren



I-9008

Injecteur à piston pour implants acryliques, en titane
 Acrylic IOL injector, titanium
 Injektor für Acryllinse, Titan



I-9005

Fourchette pour positionnement des LIO acryliques dans une cartouche, en titane
 2 Prong hook for lens positioning, titanium
 Häkchen zur Positionierung der Acryllinse in der Kartusche, Titan



INJX4

Injecteur bleu à vis, méplat, pour LIO acryliques 3 pièces
 Blue screw type injector, with cobra tip for 3 pieces acrylic IOL
 Blauer Injektor, mit Stellschraube, für dreiteilige Acryllinsen



INJX4II


Injecteur argent à vis, tête trompette, pour LIO acryliques monobloc
 Silver screw type injector, with trompette tip for monobloc acrylic IOL
 Silber-Injektor mit Stellschraube für einteilige Acryllinsen

Injecteurs et pinces LIO
IOL injectors and forceps
IOL-Injektoren und Pinzetten

Pinces à plier

IOL Forceps

Linsenfaltpinzetten

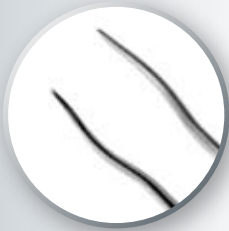


D-30647

Pince à plier pour implants acryliques
Acrylic IOL folding forceps
Faltpinzette für Acryllinsen



D-9365/S

Pince à plier de FAULKNER (MC PHERSON) mors mousses 11 mm, pour implants souples
FAULKNER (MC PHERSON) lens holding forceps for soft I.O.L., 11 mm smooth jaws
Fasspinzette nach FAULKNER (MC PHERSON), 11 mm, stumpf

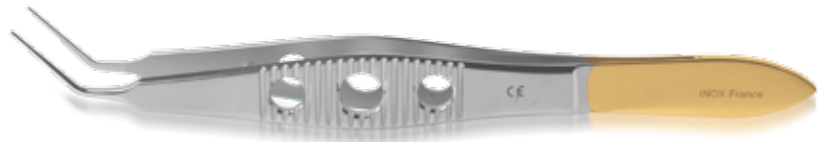

D-9367

Pince à plier de McDONALD II, croisée, mors courbes très fins 5.6 mm, pour implants souples
McDONALD II lens folding forceps for soft I.O.L., cross-action, delicate 5.6 mm long curved jaws
Faltpinzette nach McDonald, gebogen, gekreuzt, fein, 5,6 mm



D-9368

Pince à plier de McDONALD-LIVERNIOIS, mors courbes ultra fins 6.6 mm, pour implants souples
McDONALD-LIVERNIOIS lens folding forceps for soft I.O.L., very delicate 6.6 mm long curved jaws
Halte- und Faltpinzette nach McDONALD-LIVERNIOIS, gebogen, sehr fein, 6,6 mm lang



Injecteurs et pinces IIO
IOL injectors and forceps
IOL-Injektoren und Pinzetten

64

Pinces à plier

IOL Forceps

Linsenfaltpinzetten




D-7270*



Pince à implant de (GASKIN) MC PHERSON, mors mousses ultra fins 11 mm
 MC PHERSON IOL forceps (GASKIN Fragment Forceps), very delicate 11 mm long smooth jaws
Faltpinzette nach MC PHERSON (GASKIN), sehr fein, 11 mm lang, stumpf



2756B-2037

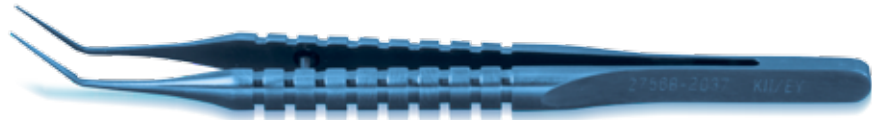


Pince à plier de KELMANN MC PHERSON, en titane
 KELMANN MC PHERSON IOL folding forceps, titanium
Faltpinzette nach KELMANN MC PHERSON, Titan





Boîtes de stérilisation
Sterilization cases
Sterilisierbehälter

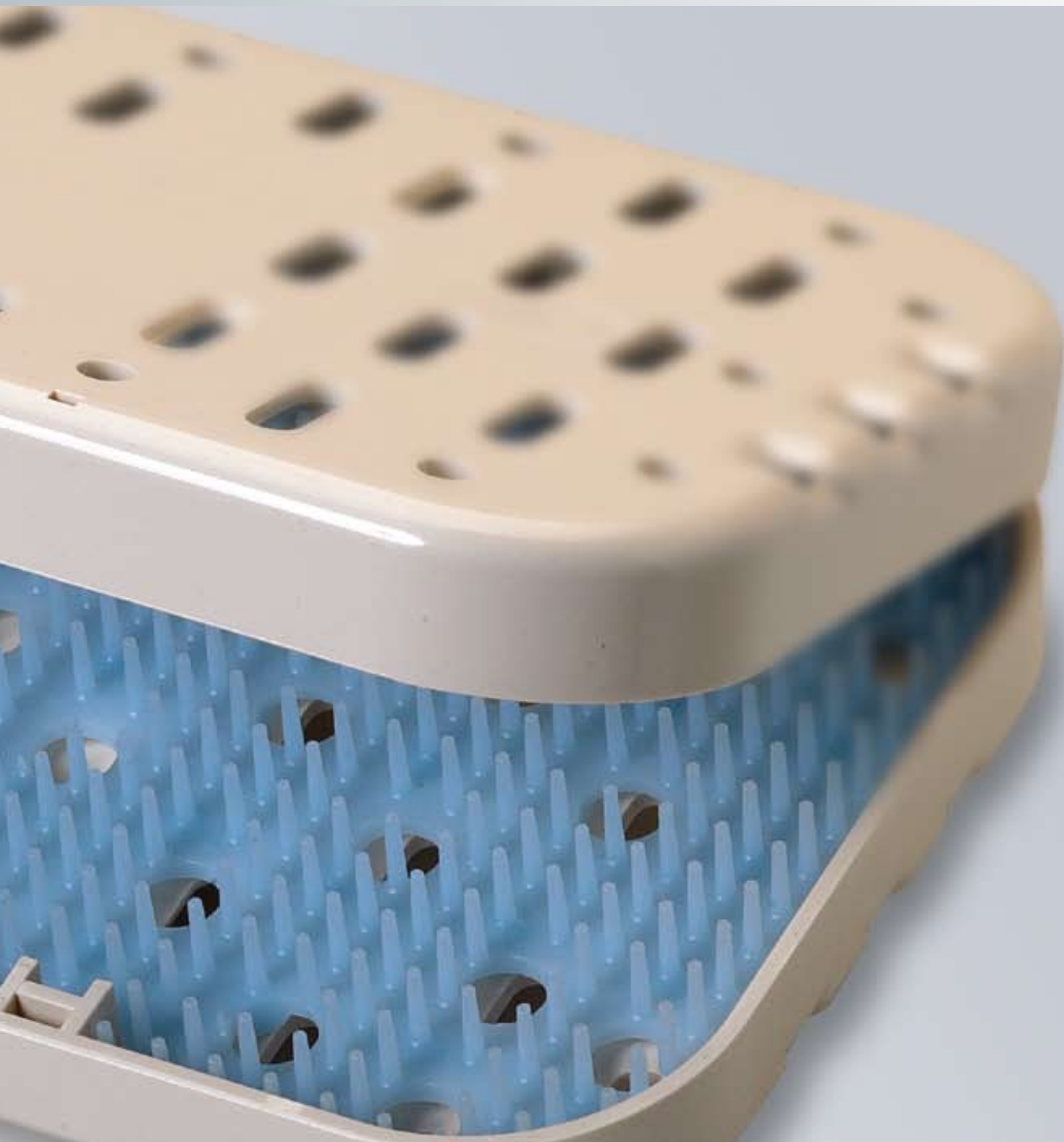


**X-1747-MO***Boîte de stérilisation petit modèle, tapis silicone, 182x50x16 mm*


Small size sterilization case, silicone mat, 182x50x16 mm

Sterilisierbehälter, klein, mit Silikonknoppenmatte, 182 x 50 x 16 mm**X-1747-SK***Boîte de stérilisation petit modèle, avec chevalet pour 2 instruments, 182x50x16 mm*

Small size sterilization case, 2 slots, 182x50x16 mm

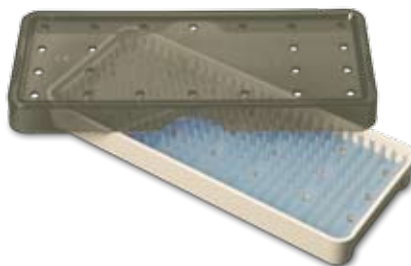Sterilisierbehälter, klein, mit 2 Einteilungen, 182 x 50 x 16 mm**X-1875-MO***Boîte de stérilisation petit modèle, tapis silicone, 194x84x25 mm*

Small size sterilization case, silicone mat, 194x84x25 mm

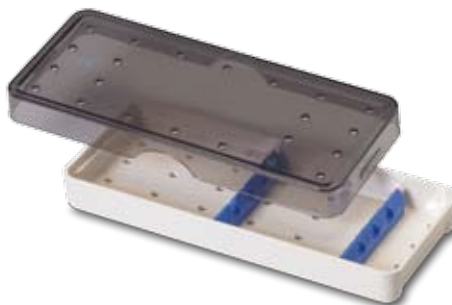
Sterilisierbehälter, klein, mit Silikonknoppenmatte, 194 x 84 x 25 mm**X-1875-SK***Boîte de stérilisation petit modèle, avec chevalet silicone pour 3 couteaux diamant, 194x84x25 mm*

Small sterilization case for 3 diamond knives, silicone bars, 194x84x25 mm

Sterilisierbehälter, klein, für 3 Diamantmesser, mit Silikonknoppenstreifen, 194 x 84 x 25 mm

**X-2710-SK***Boîte de stérilisation avec chevalet, pour 1 instrument, 181x49x18.5 mm*


Sterilization case for 1 instrument, 181x49x18.5 mm

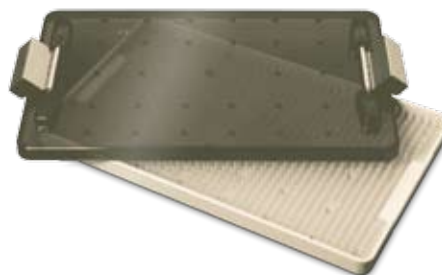Sterilisierbehälter für 1 Instrument, 181 x 49 x 18,5 mm**X-2716-1M***Boîte de stérilisation simple plateau, tapis silicone, 288x174x31 mm*

Medium size sterilization case single tray, silicone mat, 288x174x31 mm

Sterilisierbehälter, einzelne Ablage, mit Silikonmatten, 288 x 174 x 31 mm**X-2716-2M***Boîte de stérilisation double plateau, tapis silicone, 288x174x50 mm*


Sterilization case double tray, silicone mat, 288x174x50 mm

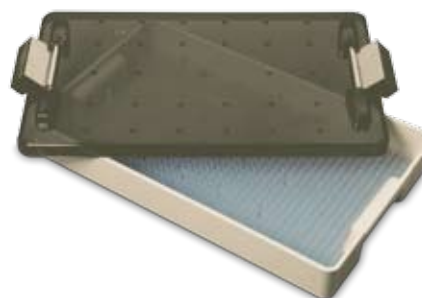Sterilisierbehälter mit Zweifachlagerung und Silikonmatten, 288 x 174 x 50 mm**X-2716-DM***Boîte de stérilisation, profonde, tapis silicone, 288x174x50 mm*

Sterilization case deep tray, silicone mat, 288x174x50 mm

Sterilisierbehälter, tiefe Ablage, mit Silikonmatten, 288 x 174 x 50 mm

**X-7-1200***Mini boîte de stérilisation, à chevalet, pour 12 instruments, 203x114x30 mm**Mini sterilization case, 12 slots, 203x114x30 mm***Mini-Sterilisierbehälter für 12 Instrumente, 203 x 114 x 30 mm****X-7-1250***Mini boîte de stérilisation, pour 12 instruments, tapis silicone, 203x114x30 mm**Mini sterilization case, 12 slots, silicone mat, 203x114x30 mm***Mini-Sterilisierbehälter für 12 Instrumente, mit Silikonmattenmatte, 203 x 114 x 30 mm****X-7-6050***Mini boîte de stérilisation, pour 6 instruments, tapis silicone, 203x114x15 mm**Mini sterilization case for 6 instruments, silicone mat, 203x114x15 mm***Mini-Sterilisierbehälter für 6 Instrumente, mit Silikonmattenmatte, 203 x 114 x 15 mm**

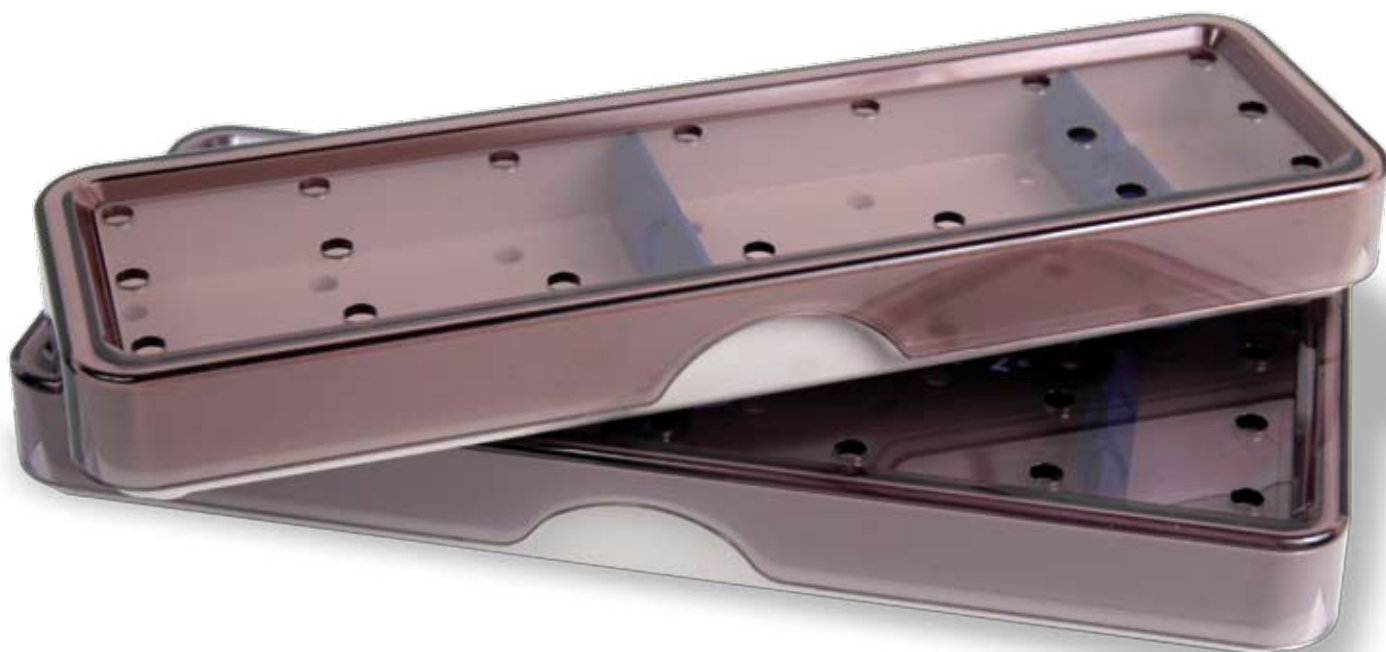

Informations réglementaires :

Regulatory information:

Regulatorische Informationen:

** Ces produits sont fabriqués par :*

*** These products are manufactured by:**

*** Diese Produkte wurden hergestellt von:**

 Croma GmbH

Industriezeile 6

2100 Leobendorf

Austria

Tel.: +43 22 62 684 68 0

Fax: +43 22 62 684 68 165



0459

Siège social :

Headquarters:

Zentrale:

AUTRICHE / AUSTRIA / ÖSTERREICH

Croma GmbH

Industriezeile 6

2100 Leobendorf

Tel.: +43 22 62 684 68 0

Fax: +43 22 62 684 68 165

www.croma.at

Filiales :

Subsidiaries:

Niederlassungen:

FRANCE / FRANKREICH

Laboratoire Cornéal Ophtalmologie/ CROMA

Atrium - Rive Gauche

19 Boulevard Paul Vaillant-Couturier

F-94854 IVRY-SUR-SEINE Cedex

Tél.: +33/145/156060

Fax: +33/146/586291

N° vert: 0 800 150 200

E-mail: info@corneal.fr

www.croma.at

ALLEMAGNE / GERMANY / DEUTSCHLAND

Croma-Pharma Deutschland

Gesellschaft m.b.H.

Rengoldshauser Straße 11

D-88662 Überlingen

Tel.: +49/7551/94717-0

Fax: +49/7551/94717-10

E-mail: info@cromapharma.de

www.cromapharma.de

POLOGNE / POLAND / POLEN

CROMA PHARMA POLSKA SP. z o.o.

Aleja Wilanowska 267

PL-02-730 Warszawa

Tel.: +48/22/853 02-34

Fax: +48/22/853 27-88

E-mail: biuro@croma.pl

www.cromapharma.pl

ROUMANIE / ROMANIA / RUMÄNIEN

Croma-Pharma SA

Str. Garibaldi nr. 18 B

RU-400325 Cluj-Napoca

Tél.: +40/264/58 58-66

Fax: +40/264/58 58-76

E-mail: office@croma.at

ESPAGNE / SPAIN / SPANIEN

CROMA PHARMA ESPANA SL

Parc Empresarial del Mediterrani

Passeig del Ferrocarril, 339 1º1º

E-08860 Castelldefels

Tél.: +34/93/634 26 90

Fax: +34/93/664 28 98

E-mail: lourdeslopez@corneal.net



CROMA

HEALTH • CARE • INNOVATION*

*SANTÉ • SOIN • INNOVATION

L.C.O. / CROMA - 19 bd Paul Vaillant-Couturier - 94854 IVRY SUR SEINE Cedex FRANCE
Tél. : +33 1 45 15 60 60 - Fax : +33 1 46 58 62 91 - E-mail : info@corneal.fr - www.croma.at